

洗浄から乾燥まで、チューブ専用の全自動タイプ

- 気管内チューブ、カテーテル類、人口呼吸器の蛇腹管などの洗浄・乾燥を**全自動**で行います。
- 洗浄・すすぎ工程は、チューブ内部に圧力をかけた**ジェット噴流方式**で内部洗浄に優れた効果を発揮します。
- 多様な専用ノズルで種類、サイズの異なるチューブを**同時に40本**まで大量処理が可能です。
- 強力な循環方式で乾燥時間を大幅に短縮。



HKN-TM1

全自動チューブ洗浄乾燥機

HKN-TMシリーズ

仕様

型式	HKN-TM1	HKN-TM1/P	
外形寸法 (mm)	W950×D550×H1820	W950×D550×H1820	
重量	約200kg	約200kg	
必要設備	電源	3相200V 3.0kVA	3相200V 3.0kVA
	給水(給湯)設備	20A配管	20A配管
	純水設備	—	20A配管
	排水設備	40A配管・自然排水	40A配管・自然排水
洗浄終了報知	ブザーと完了ランプ	ブザーと完了ランプ	
槽内寸法 (mm)	W500×D500×H1400	W500×D500×H1400	
貯液量	約45L	約45L	
給排水	自動	自動	
洗剤投入	手動	手動	
洗浄ノズル数	内部洗浄:40個 外部洗浄:16個	内部洗浄:40個 外部洗浄:16個	
適用洗剤	アルカリ洗剤:HKP-101M	アルカリ洗剤:HKP-101M	

外形寸法 (単位:mm)


各種チューブ類に対応可能なノズルも多種、ご用意いたしております



洗剤は、優れた洗浄力を発揮する弊社アルカリ洗浄剤をご使用下さい



HKP-101M
(4L入/10kg入)

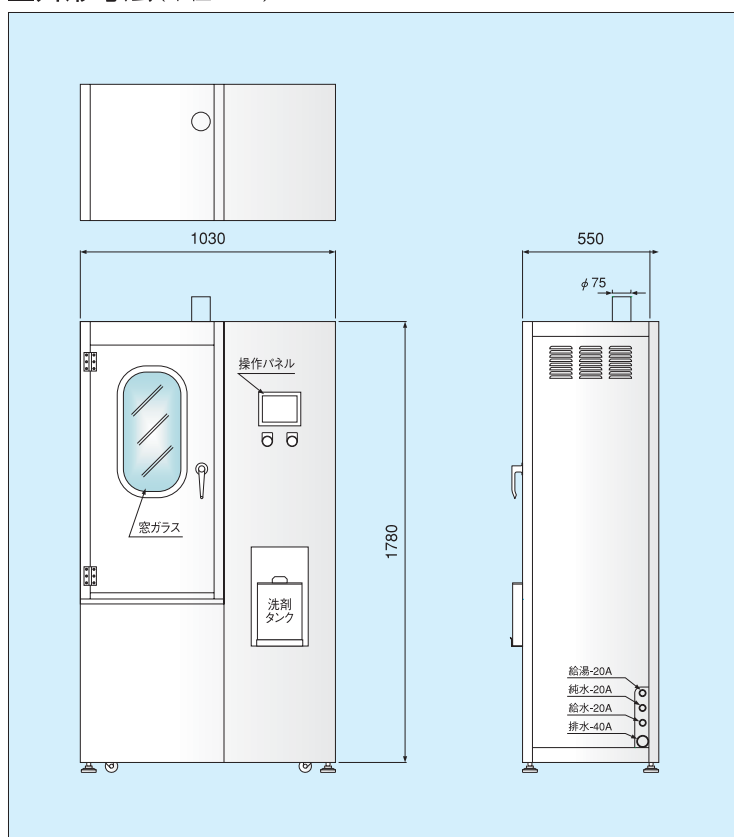

- 製品改良の為、仕様の一部を予告無く変更する事があります。また、商品の色調は印刷の為実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引取などの費用は販売店にお尋ねください。



安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

■発売元



確かな洗浄システムを創出する

株式会社
エッチ・ケイ・プランニング

〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-47
TEL:092-588-0303 FAX:092-588-0304

■製造元

日本技研工業 株式会社