

洗浄・すすぎ・熱水消毒・乾燥まで、あらゆるチューブを全自動処理

# 熱水消毒対応 全自動チューブ洗浄乾燥機

HKN-TMSシリーズ




HKN-TMS

- 気管内チューブ、カテーテル類や、人工呼吸器の蛇腹管など  
洗浄・すすぎ・熱水消毒・乾燥を全自動で行います
- 熱水処理は80℃10分のガイドライン対応
- 洗浄・すすぎ工程は、チューブ内部に圧力をかけたジェット噴流方式で内部洗浄に優れた効果を発揮します
- 多様な専用ノズルで種類、サイズの異なるチューブを同時に  
最大40本処理可能
- 強力な循環方式で乾燥時間を大幅に短縮

## 仕様

| 型 式         | HKN-TMS 1             | HKN-TMS 1/P                           |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 外 形 寸 法     | W1150×D630×H2070 (mm) | W1150×D630×H2070 (mm)                 |
| 重 量         | 約 220kg (運転時 約270kg)  | 約 220kg (運転時 約270kg)                  |
| 必要設備        | 電 源                   | 3相200V 約12.0kVA以上 (50A以上のブレーカー)       |
|             | 給 水                   | 20A配管 0.1~0.2MPa 40ℓ /分以上 (SGP、バルブ止め) |
|             | 給 湯                   | 20A配管 0.1~0.2MPa 40ℓ /分以上 (SGP、バルブ止め) |
|             | 純 水                   | 20A配管 0.1~0.2MPa 40ℓ /分以上 (SGP、バルブ止め) |
|             | 排 水                   | 40A配管* 自然排水 30ℓ /分以上 排水温度 80℃以下       |
|             | 排 気                   | 排気口径 100mm 風量3m <sup>3</sup> /min     |
| 操作・モニター表示   | 液晶コントロールターミナル         | 液晶コントロールターミナル                         |
| 洗 浄 終 了 報 知 | ブザーと「停止」キー点滅表示        | ブザーと「停止」キー点滅表示                        |
| 槽 内 寸 法     | W570×D506×H1370 (mm)  | W570×D506×H1370 (mm)                  |
| 槽 内 材 質     | ステンレス鋼 SUS-304        | ステンレス鋼 SUS-304                        |
| 貯 液 量       | 約45ℓ                  | 約45ℓ                                  |
| 給 排 水       | 自動                    | 自動                                    |
| 洗 剤 投 入     | 自動                    | 自動                                    |
| 洗 浄 ノ ズ ル 数 | 内部洗浄：40個 外部洗浄：16個     | 内部洗浄：40個 外部洗浄：16個                     |


## 外形寸法 (単位: mm)

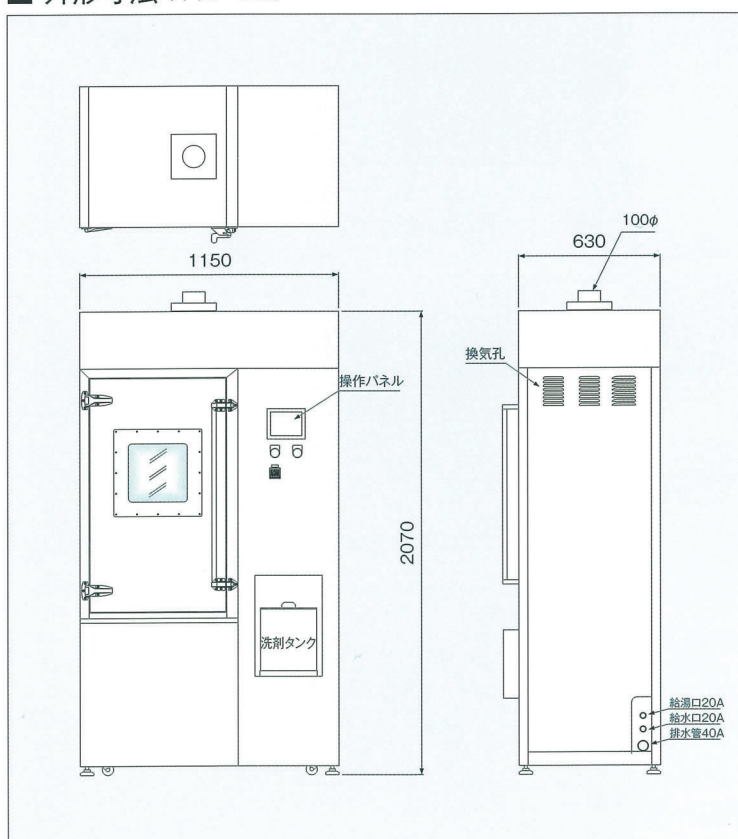

## 附属品



洗剤は、優れた洗浄力を発揮する  
弊社アルカリ洗浄剤をご使用下さい

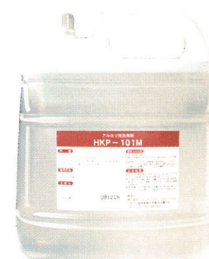

**HKP-101M**  
(4L入/10kg入)

- 製品改良の為、仕様の一部を予告無く変更する事があります。また、商品の色調は印刷の為実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引取などの費用は販売店にお尋ねください。



**安全にお使いいただくために**

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

### 発売元



確かな洗浄システムを創出する

**株式会社  
エッチ・ケイ・プランニング**

〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-47  
TEL:092-588-0303 FAX:092-588-0304

### 製造元

**日本技研工業 株式会社**